

LOKALES SERVER-BENUTZERHANDBUCH

Version der Software: ????

Einführung	3
Wofür wird der lokale Server-Manager verwendet?	3
Wie installiere ich den Lokalen Server-Manager (mit lokalem Server)?	4
Szenarien	7
Stellen Sie sicher, dass der lokale Server ordnungsgemäß funktioniert.	7
Automatische Sicherungen aktivieren	8
Wählen Sie manuell aus, wo die lokale Datenbankdatei gespeichert wird.	9
Erstellen einer manuellen Sicherung	10
Wiederherstellen der Datenbank aus der Sicherung	11
Aktualisieren von Lizenzen, die auf Ihrem lokalen Server verfügbar sind	12
Remove the Local Server Manager components	13
Fehlerbehebung	14
Was tun, wenn ein Problem auftritt?	14

WOFÜR WIRD DER LOKALE SERVER-MANAGER VERWENDET?

Große. Rehab Local Server Manager wird zum Überwachen und Verwalten von VAST verwendet. Rehab Lokaler Server. Local Server ist für die Bereitstellung einer gemeinsamen Datenbankanforderung für alle VAST-Dateien verantwortlich. Reha-Patientenstationen und Therapeutenstationen, wenn keine Internetverbindung genutzt wird.

WIE INSTALLIERE ICH DEN LOKALEN SERVER-MANAGER (MIT LOKALEM SERVER)?

1/3

Alle unsere Bewerbungen sind auf unserer Website verfügbar:

- <https://vast.rehab/download>

WIE INSTALLIERE ICH DEN LOKALEN SERVER-MANAGER (MIT LOKALEM SERVER)?

2/3

USB-SCHUTZSCHLÜSSEL (SENTINEL)

Der lokale Server kann nur funktionieren, während Ihr USB-Schutzschlüssel (Sentinel) an Ihren Computer angeschlossen ist. Die Anwendung informiert Sie, wenn Ihr USB-Schutzschlüssel nicht erkannt wird (wie auf dem Screenshot unten zu sehen).




WIE INSTALLIERE ICH DEN LOKALEN SERVER-MANAGER (MIT LOKALEM SERVER)?

3/3

VAST.REHAB SERVICE-UPDATER

VAST.Rehab Service Updater stellt sicher, dass Ihr Local Server Manager auf dem neuesten Stand ist. Die Verwendung der neuesten Version der Anwendung ist entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion des VAST.Rehab-Systems.

Sobald der USB-Schutzschlüssel (Sentinel) erfolgreich erkannt wurde, werden Sie durch die Installation des VAST.Rehab Updater Service geführt, wie im Screenshot unten zu sehen. Sollte die Anwendung anders aussehen als im Screenshot unten, bedeutet dies, dass der VAST.Rehab Service Updater bereits installiert ist.

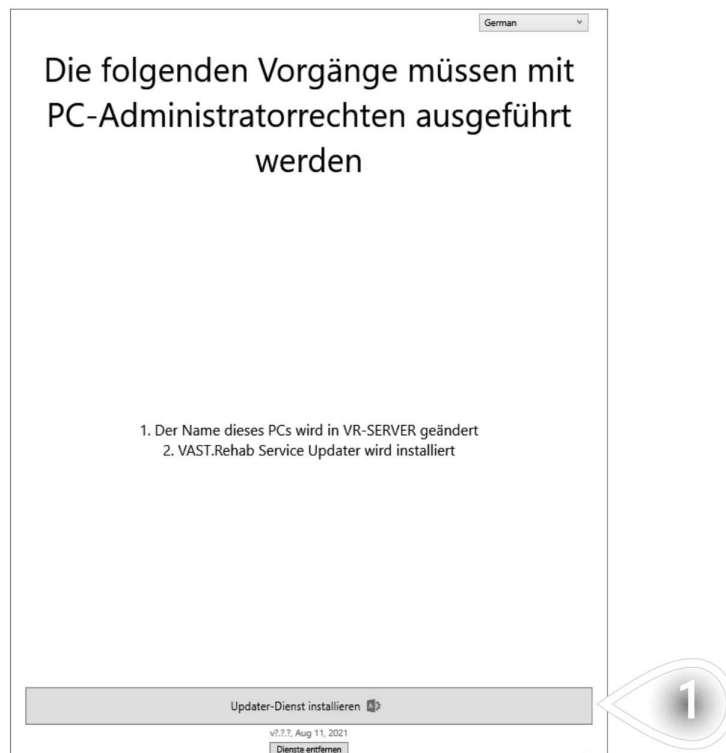


- 1 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, lassen Sie die Anwendung Local Server Manager mit Administratorrechten laufen und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

STELLEN SIE SICHER, DASS DER LOKALE SERVER ORDNUNGSGEMÄß FUNKTIONIERT.

Suchen Sie VAST.Rehab Local Server Manager im Startmenü und starten Sie die Anwendung. Alle Dienste werden wie auf dem Screenshot unten zu sehen ausgeführt.

Wenn die Anwendung nicht wie im Screenshot unten aussieht, kann dies bedeuten, dass der Service Updater installiert werden muss oder Ihr USB-Schutzschlüssel nicht an Ihren Computer angeschlossen ist.

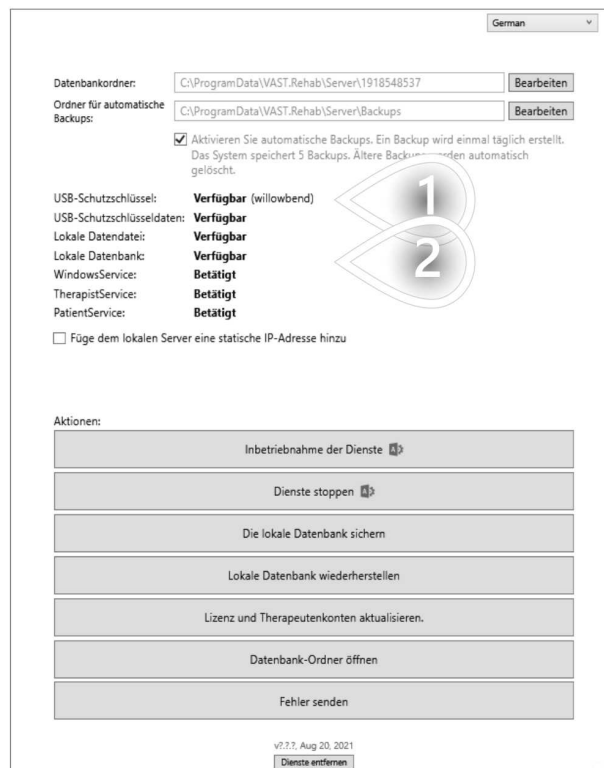

1 Ihre VAST. Rehab Administrator Login wird hier angezeigt

2 Alle Elemente müssen verfügbar sein, und die Dienstleistungen.

AUTOMATISCHE SICHERUNGEN AKTIVIEREN


Sie können den lokalen Server so konfigurieren, dass die Datenbanksicherung automatisch erstellt wird. Wenn Sie es aktivieren möchten, folgen Sie bitte dem unten beschriebenen Prozess. Es wird empfohlen, die Sicherungen auf einem anderen Datenträger als der Hauptdatenbank zu bebewahren.

The screenshot shows a configuration window for automatic backups. At the top right, there is a language dropdown menu set to 'German'. Below this, there are two input fields for file paths, each with a 'Bearbeiten' (Edit) button. The first field is labeled 'Datenbankordner:' and contains the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537'. The second field is labeled 'Ordner für automatische Backups:' and contains the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups'. A checkbox labeled 'Aktivieren Sie automatische Backups...' is checked. Below the checkbox, there is a note: 'Ein Backup wird einmal täglich erstellt. Das System speichert 5 Backups. Ältere Backups werden automatisch gelöscht.' Below this, there are several status indicators: 'USB-Schutzschlüssel: Verfügbar (willowbend)', 'USB-Schutzschlüsseldateien: Verfügbar', 'Lokale Datendatei: Verfügbar', 'Lokale Datenbank: Verfügbar', 'WindowsService: Betätigt', 'TherapistService: Betätigt', and 'PatientService: Betätigt'. At the bottom of the configuration section, there is an unchecked checkbox 'Füge dem lokalen Server eine statische IP-Adresse hinzu'. Below the configuration section, there is a section titled 'Aktionen:' containing several buttons: 'Inbetriebnahme der Dienste', 'Dienste stoppen', 'Die lokale Datenbank sichern', 'Lokale Datenbank wiederherstellen', 'Lizenz und Therapeutenkonten aktualisieren.', 'Datenbank-Ordner öffnen', and 'Fehler senden'. At the very bottom, there is a version number 'v2.2.7, Aug 20, 2021' and a button labeled 'Dienste entfernen'.

- 1 Aktivieren Sie diese Option
- 2 Wählen Sie Datenträger und Ordner aus, in dem die automatischen Sicherungen gespeichert werden sollen.

WÄHLEN SIE MANUELL AUS, WO DIE LOKALE DATENBANKDATEI GESPEICHERT WIRD.

Es wird empfohlen, die VAST nicht beizubehalten. Rehab-Datenbank und Ihr Betriebssystem auf derselben Festplattenpartition. Sie können den Speicherort manuell festlegen, indem Sie den unten beschriebenen Prozess befolgen.

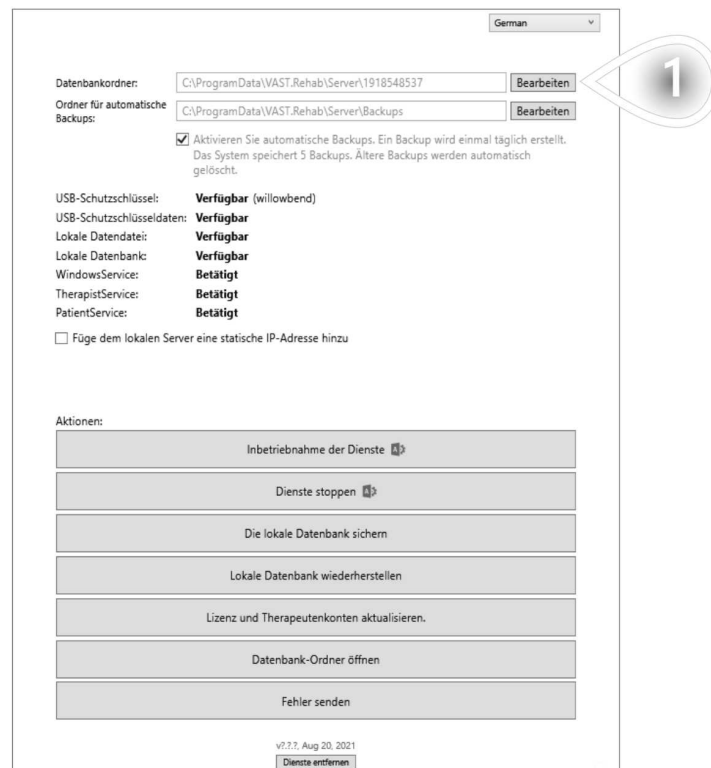

The screenshot shows the configuration window for VAST.Rehab. At the top right, there is a language dropdown menu set to 'German'. Below it, the 'Datenbankordner:' field contains the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537' and has a 'Bearbeiten' button next to it. A callout bubble with the number '1' points to this field. Below that, the 'Ordner für automatische Backups:' field contains 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups' and also has a 'Bearbeiten' button. A checkbox is checked, with the text: 'Aktivieren Sie automatische Backups. Ein Backup wird einmal täglich erstellt. Das System speichert 5 Backups. Ältere Backups werden automatisch gelöscht.' Below this, a list of system components and their status is shown: 'USB-Schutzschlüssel: Verfügbar (willowbend)', 'USB-Schutzschlüsseldateien: Verfügbar', 'Lokale Datendatei: Verfügbar', 'Lokale Datenbank: Verfügbar', 'WindowsService: Betätigt', 'TherapistService: Betätigt', and 'PatientService: Betätigt'. There is also an unchecked checkbox: 'Füge dem lokalen Server eine statische IP-Adresse hinzu'. At the bottom, there is an 'Aktionen:' section with several buttons: 'Inbetriebnahme der Dienste', 'Dienste stoppen', 'Die lokale Datenbank sichern', 'Lokale Datenbank wiederherstellen', 'Lizenz und Therapeutenkonten aktualisieren.', 'Datenbank-Ordner öffnen', and 'Fehler senden'. At the very bottom, the version 'v7.7.7, Aug 20, 2021' and a 'Dienste entfernen' button are visible.

- 1 Wählen Sie Datenträger und Ordner aus, in dem die Datenbank gespeichert werden soll.

ERSTELLEN EINER MANUELLEN SICHERUNG

Bitte folgen Sie dem unten beschriebenen Verfahren

German

Datenbankordner: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537

Ordner für automatische Backups: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups

Aktivieren Sie automatische Backups. Ein Backup wird einmal täglich erstellt. Das System speichert 5 Backups. Ältere Backups werden automatisch gelöscht.

USB-Schutzschlüssel: **Verfügbar** (willowbend)

USB-Schutzschlüsseldateien: **Verfügbar**

Lokale Datenbank: **Verfügbar**

WindowsService: **Betätigt**

TherapistService: **Betätigt**

PatientService: **Betätigt**

Füge dem lokalen Server eine statische IP-Adresse hinzu

Aktionen:

Inbetriebnahme der Dienste

Dienste stoppen

Die lokale Datenbank sichern

Lokale Datenbank wiederherstellen

Lizenz und Therapeutenkonten aktualisieren.

Datenbank-Ordner öffnen

Fehler senden

v2.7.7, Aug 20, 2021

1 Klicken und wählen Sie den Zielstandort

WIEDERHERSTELLEN DER DATENBANK AUS DER SICHERUNG

Bitte folgen Sie dem unten beschriebenen Verfahren

The screenshot shows a configuration window for VAST.Rehab. At the top right, there is a language dropdown menu set to 'German'. Below this, there are two text input fields for database paths, both containing 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537'. The first is labeled 'Datenbankordner:' and the second 'Ordner für automatische Backups:'. Each field has a 'Bearbeiten' button to its right. Below the second field, there is a checked checkbox with the text 'Aktivieren Sie automatische Backups. Ein Backup wird einmal täglich erstellt. Das System speichert 5 Backups. Ältere Backups werden automatisch gelöscht.' Below this, there are several status indicators: 'USB-Schutzschlüssel: Verfügbar (willowbend)', 'USB-Schutzschlüsseldateien: Verfügbar', 'Lokale Datendatei: Verfügbar', 'Lokale Datenbank: Verfügbar', 'WindowsService: Betätigt', 'TherapistService: Betätigt', and 'PatientService: Betätigt'. There is also an unchecked checkbox 'Füge dem lokalen Server eine statische IP-Adresse hinzu'. At the bottom of the window, there is a section titled 'Aktionen:' containing a list of buttons: 'Inbetriebnahme der Dienste', 'Dienste stoppen', 'Die lokale Datenbank sichern', 'Lokale Datenbank wiederherstellen', 'Lizenz und Therapeutenkonten aktualisieren.', 'Datenbank-Ordner öffnen', and 'Fehler senden'. A callout bubble with the number '1' points to the 'Lokale Datenbank wiederherstellen' button. At the very bottom, there is a version string 'v3.2.7, Aug 20, 2021' and a 'Dienste entfernen' button.

- 1 Klicken Sie auf die Sicherungsdatei, die Sie verwenden möchten, um die aktuell ausgeführte Datenbank zu starten

AKTUALISIEREN VON LIZENZEN, DIE AUF IHREM LOKALEN SERVER VERFÜGBAR SIND

Wenn Sie weitere Patientenstationen hinzufügen oder einige neue Module zu Ihren vorhandenen Patientenstationen aktivieren möchten, müssen Sie sich an Ihre VAST wenden. Reha-Verteiler. Wenn Ihre Bestellung abgeschlossen ist, müssen Sie den PC, auf dem Ihr lokaler Server installiert ist, mit dem Internet verbinden. Wenn die Internetverbindung aktiv ist, folgen Sie dem unten beschriebenen Prozess.

German

Datenbankkordner: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537

Ordner für automatische Backups: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups

Aktivieren Sie automatische Backups. Ein Backup wird einmal täglich erstellt. Das System speichert 5 Backups. Ältere Backups werden automatisch gelöscht.

USB-Schutzschlüssel: **Verfügbar** (willowbend)

USB-Schutzschlüsseldatei: **Verfügbar**

Lokale Datendatei: **Verfügbar**

Lokale Datenbank: **Verfügbar**

WindowsService: **Betätigt**

TherapistService: **Betätigt**

PatientService: **Betätigt**

Füge dem lokalen Server eine statische IP-Adresse hinzu

Aktionen:


- Inbetriebnahme der Dienste
- Dienste stoppen
- Die lokale Datenbank sichern
- Lokale Datenbank wiederherstellen
- Lizenz und Therapeutenkonten aktualisieren.**
- Datenbank-Ordner öffnen
- Fehler senden

v??.?. Aug 20, 2021

1 Klicken Sie auf diese Option

REMOVE THE LOCAL SERVER MANAGER COMPONENTS

Sie können die VAST.Rehab-Dienste vollständig von Ihrem Computer entfernen, indem Sie die im folgenden Screenshot markierte Schaltfläche verwenden.

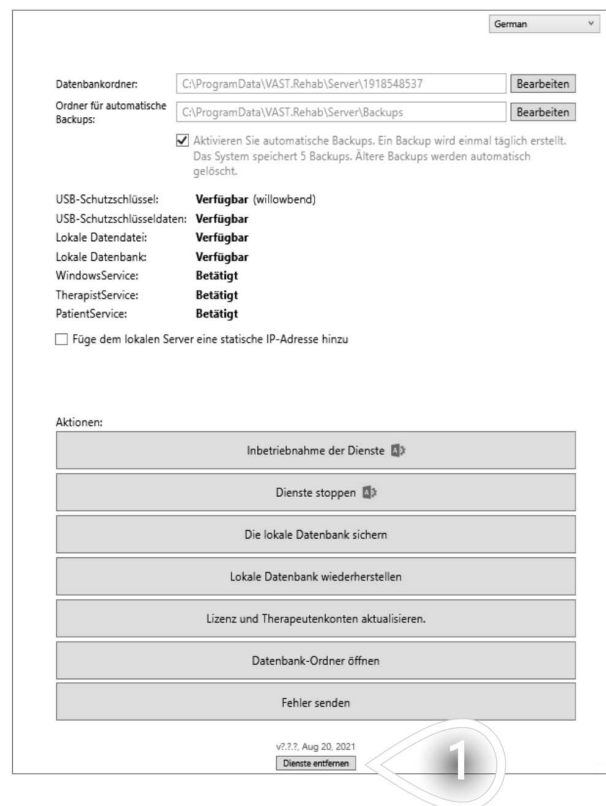

1 Verwenden Sie diese Schaltfläche, um VAST.Rehab-Dienste zu entfernen

WAS TUN, WENN EIN PROBLEM AUFTRITT?

Wenn Ihr lokaler Server aus irgendeinem Grund abstürzt, verbinden Sie bitte Ihren PC mit dem Internet und folgen Sie dem unten beschriebenen Prozess. Das System sendet uns automatisch Informationen, die beim Absturz der Anwendung gesammelt wurden - sie helfen uns, das Problem zu lösen, auf das Sie stoßen.

- 1 Klicken Sie auf diese Option