

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÍSTNÍHO SERVERU

Verze softwaru: 2025.1

Úvod	3
K čemu slouží Správce místního serveru?	3
Jak nainstaluji Správce místního serveru (s Místním serverem)?	4
Scénáře	7
Ujistěte se, že místní server funguje správně	7
Aktivace automatického zálohování	8
Ruční výběr umístění lokálního databázového souboru	9
Provedte ruční zálohování	10
Obnovení databáze ze zálohy	11
Obnovení licencí dostupných na místním serveru	12
Remove the Local Server Manager components	13
Řešení problémů	14
Co dělat, když se vyskytne problém?	14

K ČEMU SLOUŽÍ SPRÁVCE MÍSTNÍHO SERVERU?

VAST.Rehab Local Server Manager se používá k monitorování a správě VAST.Rehab Local Server. Místní server je zodpovědný za poskytování sdílené databáze pro všechny vaše patientské stanice VAST.Rehab a terapeutické stanice, pokud není použito připojení k internetu.

JAK NAINSTALUJI SPRÁVCE MÍSTNÍHO SERVERU (S MÍSTNÍM SERVEREM)?

1/3

Všechny naše aplikace jsou k dispozici v Microsoft Store. Stačí vyhledat "VAST.Rehab" a zobrazí se seznam dostupných aplikací. Do webového prohlížeče můžete také vložit následující adresu URL:

- <https://www.microsoft.com/store/apps/9P28MZ7F9RD2>

JAK NAINSTALUJI SPRÁVCE MÍSTNÍHO SERVERU (S MÍSTNÍM SERVEREM)?

2/3

OCHRANNÝ KLÍČ USB (SENTINEL)

Místní server může fungovat pouze v případě, že je váš USB Protection Key (Sentinel) připojen k počítači. Aplikace vás bude informovat, když váš ochranný klíč USB není detekován (jak je vidět na snímku obrazovky níže).



JAK NAINSTALUJI SPRÁVCE MÍSTNÍHO SERVERU (S MÍSTNÍM SERVEREM)?

3/3

VAST.REHAB AKTUALIZACE SLUŽEB

VAST.Rehab Service Updater zajišťuje, že váš místní správce serveru je aktuální. Použití nejnovější verze aplikace je zásadní pro správné fungování systému VAST.Rehab.

Když je ochranný klíč USB (Sentinel) úspěšně detekován - budete provedeni instalací služby VAST.Rehab Updater Service, jak je vidět na snímku obrazovky níže. Instalační program v případě potřeby automaticky změní název vašeho počítače na VR-SERVER. Pokud aplikace vypadá jinak než na snímku obrazovky níže, znamená to, že VAST.Rehab Service Updater je již nainstalován.




- 1 Klikněte na toto tlačítko, povolte spuštění aplikace Local Server Manager s právy správce a počkejte na dokončení instalace.

UJISTĚTE SE, ŽE MÍSTNÍ SERVER FUNGUJE SPRÁVNĚ

Najděte prosím VAST.Rehab Local Server Manager v nabídce Start a spusťte aplikaci. Všechny služby budou spuštěny tak, jak je vidět na snímku obrazovky níže.

Pokud aplikace nevypadá jako na snímku obrazovky níže, může to znamenat, že je třeba nainstalovat Service Updater nebo že váš USB Protection Key není zapojen do vašeho počítače.

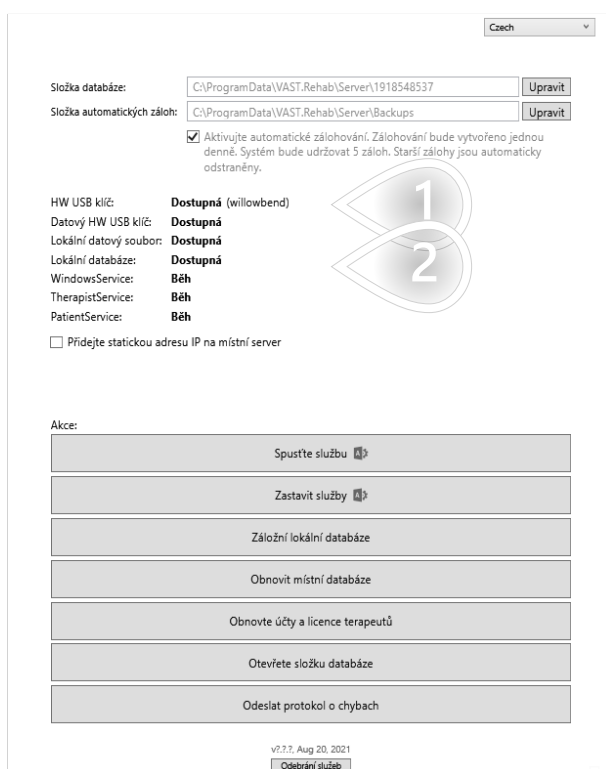

- 1 Zde se zobrazí vaše přihlašovací jméno správce VAST.Rehab
- 2 Všechny prvky musí být dostupné a služby budou spuštěny

AKTIVACE AUTOMATICKÉHO ZÁLOHOVÁNÍ

Místní server můžete nakonfigurovat tak, aby automaticky zálohoval databázi. Pokud jej chcete aktivovat, postupujte podle níže popsaného postupu. Zálohy je doporučeno uchovávat na jiném disku, než je hlavní databáze.

Složka databáze: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537 Upravit

Složka automatických záloh: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Upravit

☒ Aktivujte automatické zálohování. Zálohování bude vytvořeno jednou denně. Systém bude udržovat 5 záloh. Starší zálohy jsou automaticky odstraněny.

HW USB klíč: **Dostupná** (willowbend)

Datový HW USB klíč: **Dostupná**

Lokální datový soubor: **Dostupná**

Lokální databáze: **Dostupná**

WindowsService: **Běh**

TherapistService: **Běh**

PatientService: **Běh**

☐ Přidejte statickou adresu IP na místní server

Akce:

Spustíte službu

Zastavit služby

Záložní lokální databáze

Obnovit místní databáze

Obnovte úty a licence terapeutů

Otevřete složku databáze

Odeslat protokol o chybách


v1.7.7, Aug 20, 2021

Odebrání služeb

- 1 Nastavit tuto možnost jako aktivní
- 2 Vyberte disk a složku, do které chcete automatické zálohy ukládat

RUČNÍ VÝBĚR UMÍSTĚNÍ LOKÁLNÍHO DATABÁZOVÉHO SOUBORU

Nedoporučuje se uchovávat databázi VAST.Rehab a operační systém na stejném diskovém oddílu. Umístění můžete nastavit ručně podle níže popsaného postupu.

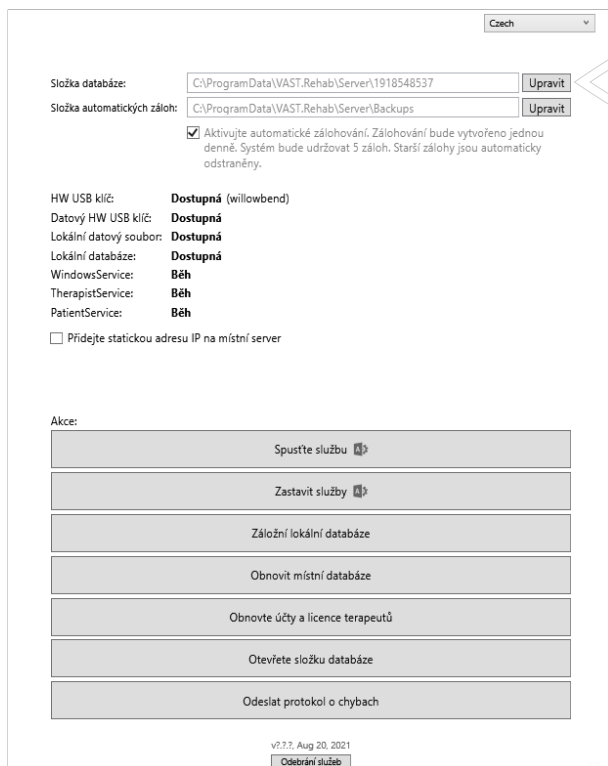

The screenshot shows the 'VAST.Rehab' configuration window. At the top right, there is a language dropdown menu set to 'Czech'. Below it, the 'Složka databáze:' field contains the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537' with an 'Upravit' button next to it. A callout bubble with the number '1' points to this field. Below it, the 'Složka automatických záloh:' field contains the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups' with an 'Upravit' button. A checkbox is checked, with the text 'Aktivujte automatické zálohování. Zálohování bude vytvořeno jednou denně. Systém bude udržovat 5 záloh. Starší zálohy jsou automaticky odstraněny.' Below this, a list of services and their status is shown: HW USB klíč: Dostupná (willowbend), Datový HW USB klíč: Dostupná, Lokální datový soubor: Dostupná, Lokální databáze: Dostupná, WindowsService: Běh, TherapistService: Běh, PatientService: Běh. There is a checkbox for 'Přidejte statickou adresu IP na místní server' which is unchecked. At the bottom, there is a section 'Akce:' with several buttons: 'Spustíte službu', 'Zastavit služby', 'Záloží lokální databáze', 'Obnovit místní databáze', 'Obnovte účty a licence terapeutů', 'Otevřete složku databáze', and 'Odeslat protokol o chybách'. At the very bottom, there is a version string 'v7.7.7, Aug 20, 2021' and a button 'Odstraní službu'.

- 1 Vyberte disk a složku, do které chcete databázi uložit

PROVEĎTE RUČNÍ ZÁLOHOVÁNÍ

Postupujte prosím podle níže popsaného postupu

Czech

Složka databáze: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537 **Upravit**

Složka automatických záloh: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups **Upravit**

☒ Aktivujte automatické zálohování. Zálohování bude vytvořeno jednou denně. Systém bude udržovat 5 záloh. Starší zálohy jsou automaticky odstraněny.

HW USB klíč: **Dostupná (willowbend)**

Datový HW USB klíč: **Dostupná**

Lokální datový soubor: **Dostupná**

Lokální databáze: **Dostupná**

WindowsService: **Běh**

TherapistService: **Běh**

PatientService: **Běh**

☐ Přidejte statickou adresu IP na místní server

Akce:

Spustíte službu

Zastavit službu

1 Záloží lokální databáze

Obnovit místní databáze

Obnovte účty a licence terapeutů

Otevřete složku databáze

Odeslat protokol o chybách

v7.7.7, Aug 20, 2021

Odebrání služeb

1 Klikněte a vyberte cílovou lokalitu

OBNOVENÍ DATABÁZE ZE ZÁLOHY


Postupujte prosím podle níže popsánoho postupu

The screenshot shows the 'Czech' language setting at the top right. Below it, there are two input fields for database paths, each with an 'Upravit' (Edit) button. The first field is 'Složka databáze:' with the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537'. The second field is 'Složka automatických záloh:' with the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups'. Below these fields is a checked checkbox labeled 'Aktivujte automatické zálohování. Zálohování bude vytvořeno jednou denně. Systém bude udržovat 5 záloh. Starší zálohy jsou automaticky odstraněny.' (Enable automatic backup. Backup will be created once a day. The system will maintain 5 backups. Older backups are automatically removed). Below this is a list of system components and their status: HW USB klíč: Dostupná (willowbend), Datový HW USB klíč: Dostupná, Lokální datový soubor: Dostupná, Lokální databáze: Dostupná, WindowsService: Běh, TherapistService: Běh, PatientService: Běh. There is also an unchecked checkbox labeled 'Přidejte statickou adresu IP na místní server'. Below this is a section titled 'Akce:' (Actions) containing seven buttons: 'Spustíte službu' (Start service), 'Zastavit službu' (Stop service), 'Záloží lokální databáze' (Backup local database), 'Obnovit místní databáze' (Restore local database), 'Obnovte účty a licence terapeutů' (Restore accounts and licenses of therapists), 'Otevřete složku databáze' (Open database folder), and 'Odeslat protokol o chybách' (Send error log). A callout bubble with the number '1' points to the 'Obnovit místní databáze' button. At the bottom, there is a version string 'v7.7.7, Aug 20, 2021' and a button labeled 'Odstránil službu' (Remove service).

- 1 Klikněte a vyberte záložní soubor, který chcete použít k nahrazení aktuálně spuštěné databáze

OBNOVENÍ LICENCÍ DOSTUPNÝCH NA MÍSTNÍM SERVERU

Pokud potřebujete přidat další pacientské stanice nebo aktivovat některé nové moduly ke stávajícím pacientským stanicím, musíte kontaktovat svého distributora VAST.Rehab. Po dokončení objednávky je třeba připojit počítač, na kterém je nainstalován váš lokální server, k internetu. Když je aktivní připojení k internetu, postupujte podle níže popsaného postupu.

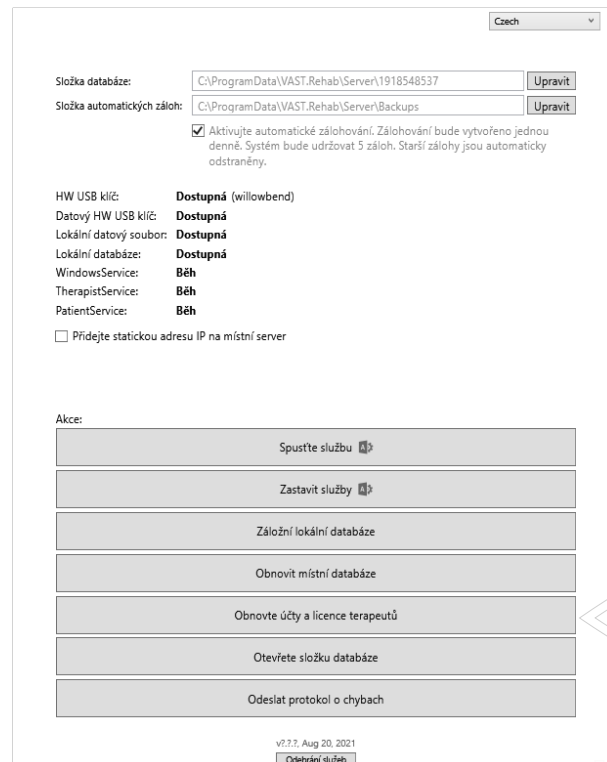


The screenshot shows a software configuration window for VAST.Rehab. At the top right is a language dropdown set to 'Czech'. Below are two text input fields for database paths, each with an 'Upravit' (Edit) button. A checkbox for automatic backups is checked, with a note about daily backups and a 5-day retention period. Below this is a list of system components and their status: HW USB klíč (Dostupná), Datový HW USB klíč (Dostupná), Lokální datový soubor (Dostupná), Lokální databáze (Dostupná), WindowsService (Běh), TherapistService (Běh), and PatientService (Běh). There is an unchecked checkbox for static IP. At the bottom is a section labeled 'Akce:' containing seven buttons: 'Spustíte službu', 'Zastavit služby', 'Záložní lokální databáze', 'Obnovit místní databáze', 'Obnovte účty a licence terapeutů' (highlighted with a callout bubble containing the number 1), 'Otevřete složku databáze', and 'Odeslat protokol o chybách'. The footer shows the version 'v2.7.7, Aug 20, 2021' and a button 'Odstraní službu'.

1 Klikněte na tuto možnost

REMOVE THE LOCAL SERVER MANAGER COMPONENTS


Služby VAST.Rehab můžete z počítače zcela odstranit pomocí tlačítka označeného na snímku obrazovky níže.

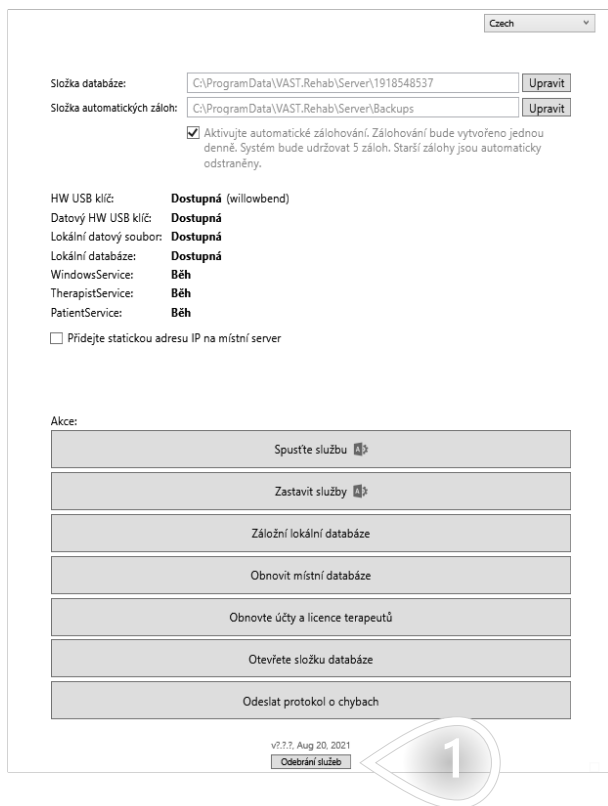

- 1 Pomocí tohoto tlačítka odeberete služby VAST.Rehab

CO DĚLAT, KDYŽ SE VYSKYTNE PROBLÉM?

Pokud z nějakého důvodu dochází k chybě místního serveru, připojte počítač k internetu a postupujte podle níže popsáního postupu. Systém nám automaticky zašle informace shromážděné při pádu aplikace - pomohou nám vyřešit problém, se kterým se setkáváte.

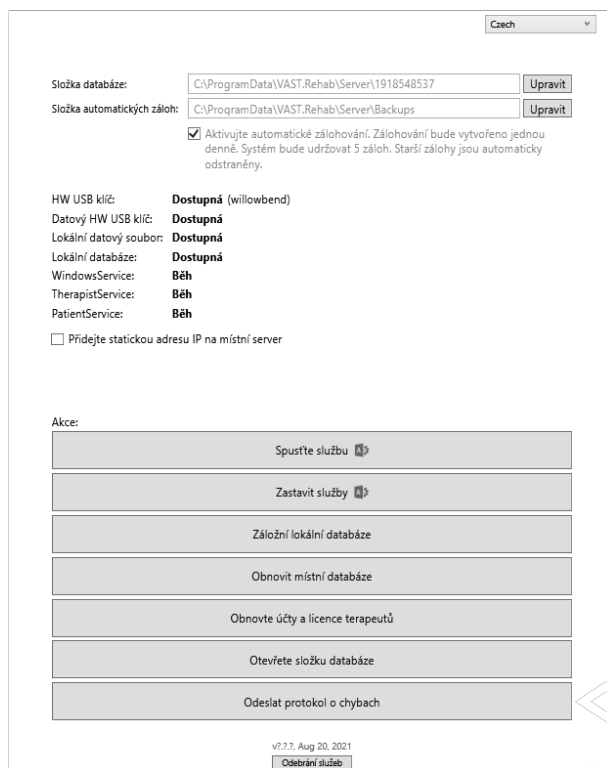

Czech

Složka databáze: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537 Upravit

Složka automatických záloh: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Upravit

☒ Aktivujte automatické zálohování. Zálohování bude vytvořeno jednou denně. Systém bude udržovat 5 záloh. Starší zálohy jsou automaticky odstraněny.

HW USB klíč: **Dostupná** (willowbend)

Datový HW USB klíč: **Dostupná**

Lokální datový soubor: **Dostupná**

Lokální databáze: **Dostupná**

WindowsService: **Běh**

TherapistService: **Běh**

PatientService: **Běh**

☐ Přidejte statickou adresu IP na místní server

Akce:

- Spustíte službu
- Zastavíte služby
- Záložní lokální databáze
- Obnovit místní databáze
- Obnovte účty a licence terapeutů
- Otevřete složku databáze
- Odeslat protokol o chybách

v1.7.7, Aug 20, 2021

Odebrání služeb

1 Klikněte na tuto možnost