

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA LOKALNEGO SERWERA

Wersja oprogramowania: 2025.1

Wprowadzenie	3
Do czego służy aplikacja Local Server Manager?	3
Jak zainstalować aplikację Local Server Manager (z serwerem lokalnym)?	4
Scenariusze	7
Upewnij się, że serwer lokalny działa poprawnie	7
Aktywuj automatyczne kopie zapasowe	8
Wybierz ręcznie miejsce przechowywania pliku lokalnej bazy danych	9
Utwórz ręczną kopię zapasową	10
Przywróć bazę danych z kopii zapasowej	11
Odśwież licencje dostępne na serwerze lokalnym	12
Remove the Local Server Manager components	13
Rozwiązywanie problemów	14
Co zrobić, gdy pojawi się problem?	14

DO CZEGO SŁUŻY APLIKACJA LOCAL SERVER MANAGER?

VAST.Rehab Local Server Manager służy do monitorowania lokalnego serwera VAST.Rehab i zarządzania nim. Serwer lokalny jest odpowiedzialny za udostępnianie współdzielonej bazy danych dla wszystkich stacji pacjentów VAST.Rehab i stacji terapeutów, jeśli połączenie internetowe nie jest używane.

JAK ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ LOCAL SERVER MANAGER (Z SERWEREM LOKALNYM)? 1/3

Wszystkie nasze aplikacje są dostępne w sklepie Microsoft Store. Możesz po prostu wyszukać frazę "VAST.Rehab" i zostanie wyświetlona lista dostępnych aplikacji. Możesz również wkleić następujący adres URL do przeglądarki internetowej:

- <https://www.microsoft.com/store/apps/9P28MZ7F9RD2>

JAK ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ LOCAL SERVER MANAGER (Z SERWEREM LOKALNYM)? 2/3

KLUCZ ZABEZPIECZAJĄCY USB (SENTINEL)

Serwer lokalny może działać tylko wtedy, gdy klucz zabezpieczający USB (Sentinel) jest podłączony do komputera. Aplikacja poinformuje Cię, gdy Twój klucz zabezpieczający USB nie zostanie wykryty (co widać na zrzucie ekranu poniżej).




JAK ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ LOCAL SERVER MANAGER (Z SERWEREM LOKALNYM)? 3/3

VAST.REHAB SERVICE UPDATER

VAST.Rehab Service Updater zapewnia aktualność aplikacji Local Server Manager. Korzystanie z najnowszej wersji aplikacji jest kluczowe dla poprawnego działania systemu VAST.Rehab.

Po pomyślnym wykryciu klucza zabezpieczającego USB (Sentinel) zostaniesz poprowadzony przez instalację VAST.Rehab Updater Service, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Jeśli aplikacja wygląda inaczej niż na poniższym zrzucie ekranu, oznacza to, że usługa aktualizująca VAST.Rehab jest już zainstalowana.

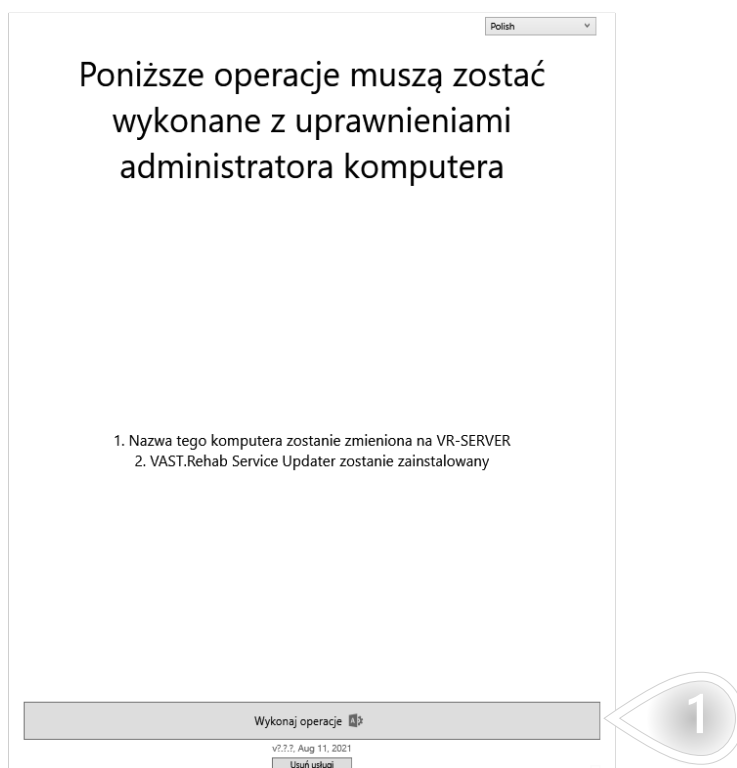


- 1 Kliknij ten przycisk, pozwól aplikacji Local Server Manager działać z uprawnieniami administratora i poczekaj na zakończenie instalacji.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SERWER LOKALNY DZIAŁA POPRAWNIE

Znajdź VAST.Rehab Local Server Manager w menu Start i uruchom aplikację. Wszystkie usługi będą działać, jak widać na poniższym zrzucie ekranu.

Jeśli aplikacja nie wygląda tak, jak na poniższym zrzucie ekranu, może to oznaczać, że należy zainstalować Service Updater lub klucz zabezpieczający USB nie jest podłączony do komputera.

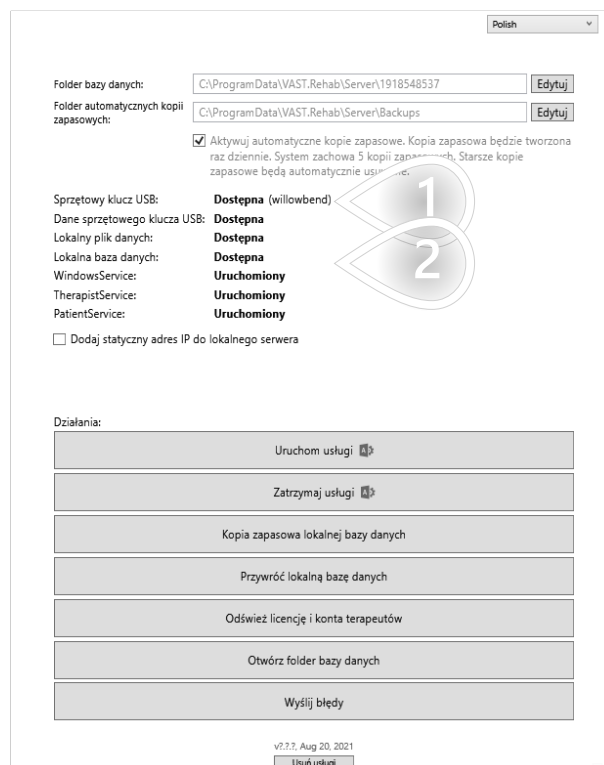

- 1 Twój login administratora VAST.Rehab powinien być wyświetlony tutaj
- 2 Wszystkie elementy powinny być dostępne, a usługi powinny działać

AKTYWUJ AUTOMATYCZNE KOPIE ZAPASOWE

Możesz skonfigurować serwer lokalny do automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy danych. Jeśli chcesz aktywować tę funkcję, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Zaleca się przechowywanie kopii zapasowych na innym dysku niż główna baza danych.

Polish

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopia zapasowa będzie tworzona raz dziennie. System zachowa 5 kopii zapasowych. Starsze kopie zapasowe będą automatycznie usuwane.

Sprzętowy klucz USB: Dostępna (willowbend)

Dane sprzętowego klucza USB: Dostępna

Lokalny plik danych: Dostępna

Lokalna baza danych: Dostępna

WindowsService: Uruchomiony

TherapistService: Uruchomiony

PatientService: Uruchomiony

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencje i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy


v2.2.7, Aug 20, 2021

Usuń usługi

- 1 Włącz tę opcję
- 2 Wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisywać automatyczne kopie zapasowe

WYBIERZ RĘCZNIE MIEJSCE PRZECHOWYWANIA PLIKU LOKALNEJ BAZY DANYCH

Nie zaleca się trzymania bazy danych VAST.Rehab i systemu operacyjnego na tej samej partycji dysku. Lokalizację można ustawić ręcznie, postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

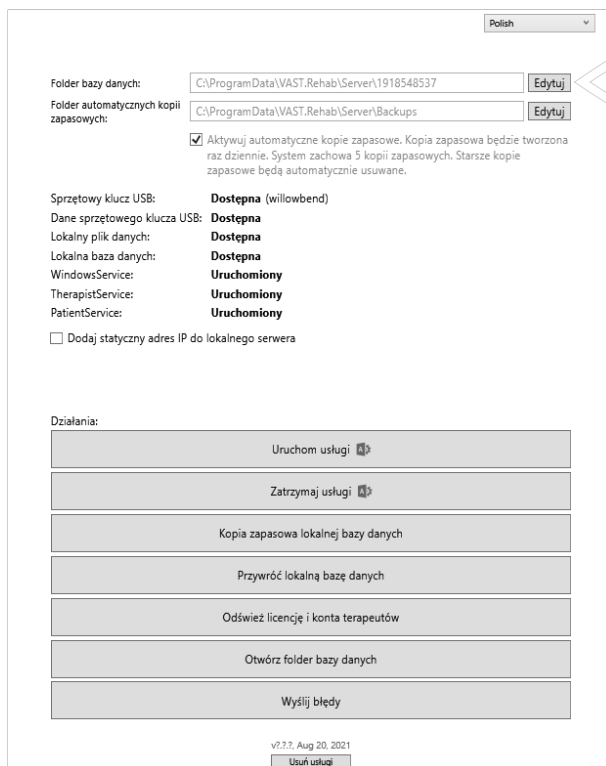

The screenshot shows the VAST.Rehab configuration window. The language is set to Polish. The 'Folder bazy danych' field is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Folder automatycznych kopii zapasowych' field is also visible. The 'Aktywuj automatyczne kopie zapasowe' checkbox is checked. The status of various services is listed below, including 'Dostępna (willowbend)', 'Dostępna', 'Dostępna', 'Uruchomiony', 'Uruchomiony', and 'Uruchomiony'. The 'Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera' checkbox is unchecked. The 'Działania' section contains several buttons: 'Uruchom usługi', 'Zatrzymaj usługi', 'Kopia zapasowa lokalnej bazy danych', 'Przywróć lokalną bazę danych', 'Odśwież licencję i konta terapeutów', 'Otwórz folder bazy danych', and 'Wyślij błędy'. The version 'v2.7.7, Aug 20, 2021' and a 'Usuń usługi' button are at the bottom.

- 1 Wybierz dysk i folder, w którym chcesz przechowywać bazę danych

UTWÓRZ RĘCZNĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej

Polish

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopia zapasowa będzie tworzona raz dziennie. System zachowa 5 kopii zapasowych. Starsze kopie zapasowe będą automatycznie usuwane.

Sprzętowy klucz USB:	Dostępna (willowbend)
Dane sprzętowego klucza USB:	Dostępna
Lokalny plik danych:	Dostępna
Lokalna baza danych:	Dostępna
WindowsService:	Uruchomiony
TherapistService:	Uruchomiony
PatientService:	Uruchomiony

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:


- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencje i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy

v2.2.7, Aug 20, 2021
Usuń usługi

1 Kliknij i wybierz lokalizację docelową

PRZYWRÓĆ BAZĘ DANYCH Z KOPII ZAPASOWEJ

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej

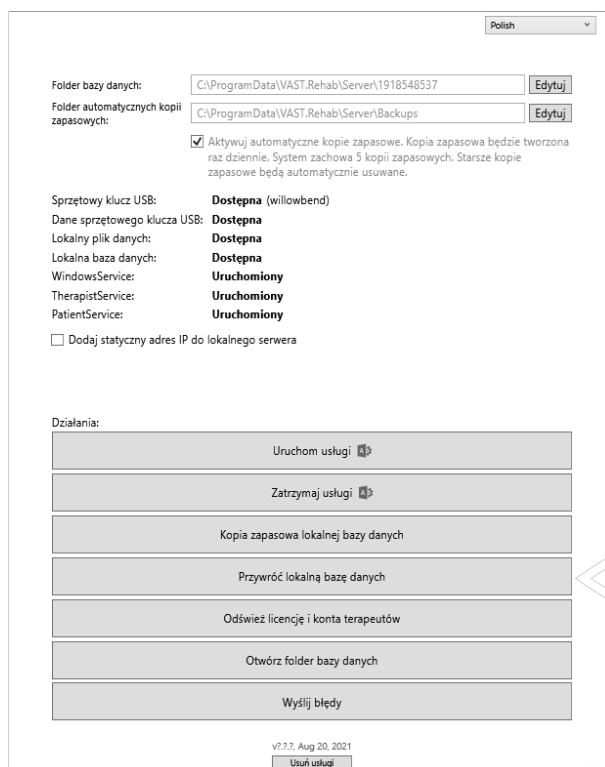


The screenshot shows the VAST.Rehab software interface in Polish. At the top right, there is a language dropdown menu set to 'Polish'. Below this, there are two text input fields for folder paths, each with an 'Edytuj' (Edit) button. The first field is 'Folder bazy danych:' with the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537'. The second field is 'Folder automatycznych kopii zapasowych:' with the path 'C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups'. Below these fields is a checked checkbox labeled 'Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopia zapasowa będzie tworzona raz dziennie. System zachowa 5 kopii zapasowych. Starsze kopie zapasowe będą automatycznie usuwane.' Below this is a status section with labels and status indicators: 'Sprzętowy klucz USB: Dostępna (willowbend)', 'Dane sprzętowego klucza USB: Dostępna', 'Lokalny plik danych: Dostępna', 'Lokalna baza danych: Dostępna', 'WindowsService: Uruchomiony', 'TherapistService: Uruchomiony', and 'PatientService: Uruchomiony'. There is also an unchecked checkbox labeled 'Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera'. Below this is a 'Działania:' (Actions) section with a list of buttons: 'Uruchom usługi', 'Zatrzymaj usługi', 'Kopia zapasowa lokalnej bazy danych', 'Przywróć lokalną bazę danych' (highlighted with a callout '1'), 'Odśwież licencje i konta terapeutów', 'Otwórz folder bazy danych', and 'Wyślij błędy'. At the bottom, there is a version string 'v2.2.7, Aug 20, 2021' and a 'Usuń usługi' (Remove services) button.

- 1 Kliknij i wybierz plik kopii zapasowej, którego chcesz użyć do zastąpienia aktualnie używanej bazy danych

ODŚWIEŻ LICENCJE DOSTĘPNE NA SERWERZE LOKALNYM

Jeśli chcesz dodać więcej stacji pacjenta lub aktywować nowe moduły do istniejących stacji, skontaktuj się z dystrybutorem VAST.Rehab. Po sfinalizowaniu zamówienia musisz podłączyć komputer, na którym jest zainstalowany serwer lokalny, do Internetu. Gdy połączenie internetowe jest aktywne, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

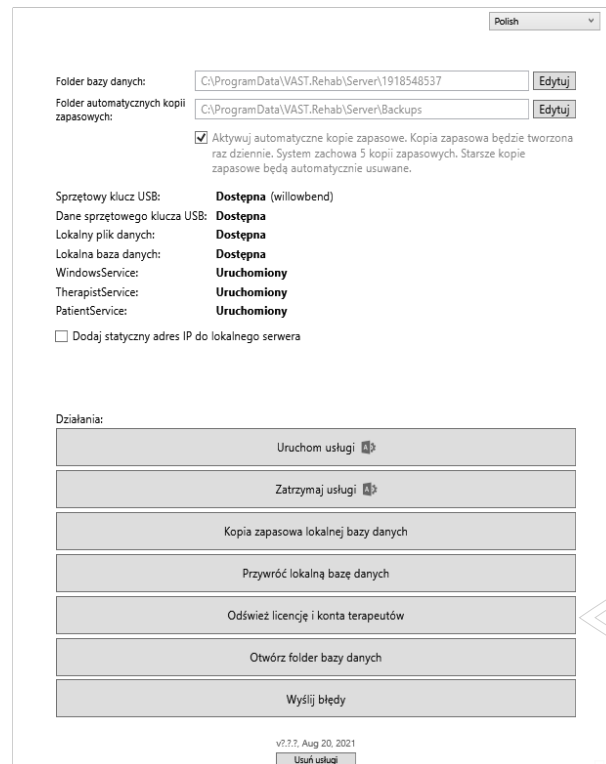

Polish

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537 **Edytuj**

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups **Edytuj**

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopia zapasowa będzie tworzona raz dziennie. System zachowa 5 kopii zapasowych. Starsze kopie zapasowe będą automatycznie usuwane.

Sprzętowy klucz USB: **Dostępna (willowbend)**

Dane sprzętowego klucza USB: **Dostępna**

Lokalny plik danych: **Dostępna**

Lokalna baza danych: **Dostępna**

WindowsService: **Uruchomiony**

TherapistService: **Uruchomiony**

PatientService: **Uruchomiony**

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencje i konta terapeutów**
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy


v2.7.7, Aug 20, 2021

Uruch usługi

1 Kliknij tę opcję

REMOVE THE LOCAL SERVER MANAGER COMPONENTS

Możesz całkowicie usunąć VAST.Rehab Services z komputera za pomocą przycisku zaznaczonego na zrzucie ekranu poniżej.

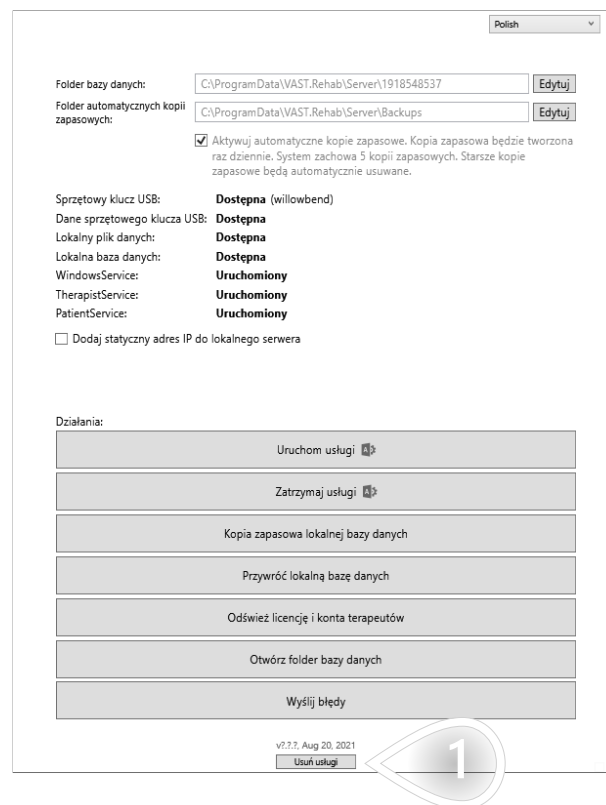

1 Użyj tego przycisku, aby usunąć usługi VAST.Rehab

CO ZROBIĆ, GDY POJAWI SIĘ PROBLEM?

Jeśli z jakiegoś powodu serwer lokalny zawiesza się, podłącz komputer do Internetu i postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej. System automatycznie prześle nam informacje zebrane po awarii aplikacji - pomogą nam one rozwiązać napotkany problem.

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\1918548537 **Edytuj**

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups **Edytuj**

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopia zapasowa będzie tworzona raz dziennie. System zachowa 5 kopii zapasowych. Starsze kopie zapasowe będą automatycznie usuwane.

Sprzętowy klucz USB: **Dostępna (willowbend)**

Dane sprzętowego klucza USB: **Dostępna**

Lokalny plik danych: **Dostępna**

Lokalna baza danych: **Dostępna**

WindowsService: **Uruchomiony**

TherapistService: **Uruchomiony**

PatientService: **Uruchomiony**

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencję i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy**

v2.2.7, Aug 20, 2021 **Usuń usługi**

1 Kliknij tę opcję